




BIOPTRON[®] 
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

FILTREID
ESTÜ (ET)

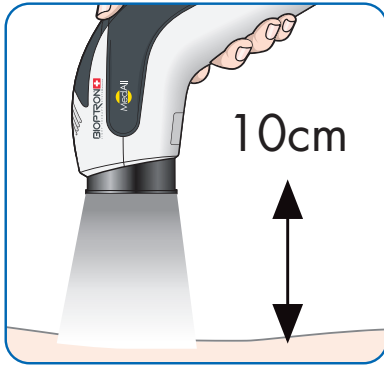

1



2



3



4

KUIDAS KASUTADA?

Asetage BIOPTRON seade 10 cm kaugusel soovitud filtriga nii, et see kataks ala, mida soovite töödelda (pilt 1). Värvifiltri läbimõõdust suuremate piirkondade töötlemisel töödelge neid ükshaaval vastavalt soovitatud ajale.

KUIDAS FILTRIT VAHETADA?

Võtke ettevaatlikult ja ilma jõuta välja vahetatav filter (Pilt 2) ja sisestage soovitud värvifilter, nagu on näidatud pildil 3. Hoidke kinni pigem filtri välimisest rõngast kui läätsest.

KUIDAS FILTRIT PUHASTADA? (Pilt 4)

1. Eemaldage filter seadmest, hoides kinni filtri välimisest rõngast.
2. Kasutage pehmet, märga, ebemevaba lappi, et vältida klaasipinna kriimustamist.
3. Kuivatage filter teise ebemevaba lapiga.

GARANTII:

- 5 aastat, kui kasutatakse ettenähtud viisil ja kui järgitakse hoiatusi
- See garantii katab materjali- ja tootmisdefektid
- See garantii ei kata tavapärasest kulumisest tulenevaid esteetilisi muudatusi, mis ei mõjuta toote toimivust, ega toote väärkasutusest põhjustatud kahjustusi.

HOIATUSED

1. Ärge kasutage klaaspinna ja filtrirõnga sise- ega väliskülje puhastamiseks kemikaale (nt isopropüülalkoholi).
2. Hoidke filtrit kaitsvas kotis, et vältida tolmu kogunemist ja värvimuutust päikesevalguse käes.
3. Filter on valmistatud haprast klaasist, seega tuleb seda käsitseda ettevaatlikult!
4. Kasutajal ei ole lubatud filtriläätse eemaldada.



PMD-ME145-22-ET
BIOPTRON FILTER IFU



BIOPTRON AG
SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



WWW.BIOPTRON.COM

ESTÜ (ET)